

Eclipse A1c™

Hemoglobin A1c POC Analyzer



KEMENKES RI AKL 20207718049 (ALAT)
KEMENKES RI AKL 20207516478 (REAGEN KIT)

STOP THE SILENT KILLER DENGAN RUTIN KONTROL HbA1c

Importir dan Distributor Resmi:

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

FITUR DAN MANFAAT

-  Waktu pemeriksaan singkat
-  Alat dapat terhubung dengan *scanner*, *printer*, dan komputer
-  Pemeriksaan HbA1c dilakukan secara otomatis
-  Hanya butuh sampel darah sejumlah 1 μ L
-  Dapat mengukur gula darah sewaktu & HbA1c (2 in 1)
-  Kapasitas Memori hingga 500 tes

CARA PENGGUNAAN

STEP 1

Siapkan Sampel:

1. Dari Jari : Cuci tangan dan keringkan, kemudian tusuk jari menggunakan lancet.
2. Dari Vena : Darah bisa disimpan dalam tabung EDTA yang disimpan pada suhu 4°C selama 1 minggu.

STEP 2

Nyalakan Alat, alat akan mulai inisialisasi secara otomatis. *

STEP 3


Sentuh ujung kapiler holder pada jari yang sudah ditusuk, pastikan darahnya cukup .

STEP 4

Masukkan cartridge ke dalam kompartemennya. Jangan setuh bagian RTD (*Optical*)

STEP 5

Setelah 6 menit maka akan muncul hasil

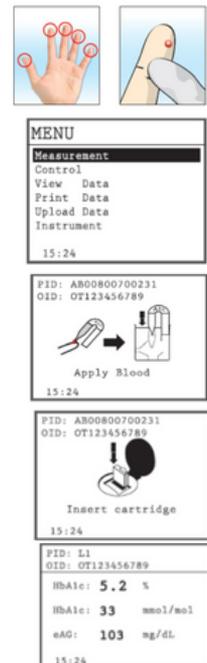

SPESIFIKASI

Parameter	Keterangan
Test Cartridge	Eclipse HbA1c Reagent Cartridge atau Optical Check Cartridge
Sample Size	0.8 μ l - 1 μ l
Unit / Satuan ukur	HbA1c (%), HbA1c (mmol/mol), eAG (mg/dL)
Kisaran Pengukuran	4~14%
Waktu Pengukuran	5,5 menit
Metode Pemeriksaan	Immunoassay, Photometry, Turbidity
Cahaya	630nm LED
Ukuran Layar LCD	2.4 inci LCD berwarna (with backlight)
Tampilan	Tanggal/Jam, ID Pasien, kadar HbA1c (%), HbA1c (mmol) dan nilai eAG
Hasil Tes	259 hasil tes dengan tanggal dan waktu
Berat	1,2 Kg

